

## Lyxumia

Lyxumia je zdravilo za sladkorno bolezen, ki vsebuje zdravilno učinkovino liksisenatid. Na voljo je v obliki raztopine za injiciranje v predhodno napolnjenih peresnikih, ki v vsakem odmerku vsebujejo 10 ali 20 mikrogramov liksisenatida.

### Shranjevanje zdravila Lyxumia

**Pred prvo uporabo:** shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzujte. Shranjujte proč od zamrzovalnega razdelka hladilnika.

**Med uporabo injekcijskega peresnika:** peresnik, ki je shranjen na temperaturi do 30 °C, lahko uporabljate 14 dni (beri navodila za uporabo, ki so priložena v škatlici zdravila!).

### Kako se zdravilo Lyxumia uporablja?

Zdravilo Lyxumia se injicira enkrat na dan, **vsakič eno uro pred istim obrokom**. Izbrati je treba obrok, pri katerem je injiciranje zdravila Lyxumia za vas najbolj praktično; potem je treba injekcijo zdravila Lyxumia po možnosti uporabljati vsak dan pred istim obrokom!


Če **izpustite odmerek zdravila Lyxumia**, si ga lahko injicirate v **uri pred naslednjim obrokom**. Ne uporabite dveh odmerkov hkrati, da bi nadomestili pozabljeno injekcijo.

### Odlaganje peresnika

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

### Izberite svoje mesto injiciranja

Injicira se pod kožo v trebušno steno (sprednji del pasu) ali stegno. Če vam injicija da druga oseba, vam zdravilo lahko injicira v vašo nadlaket.

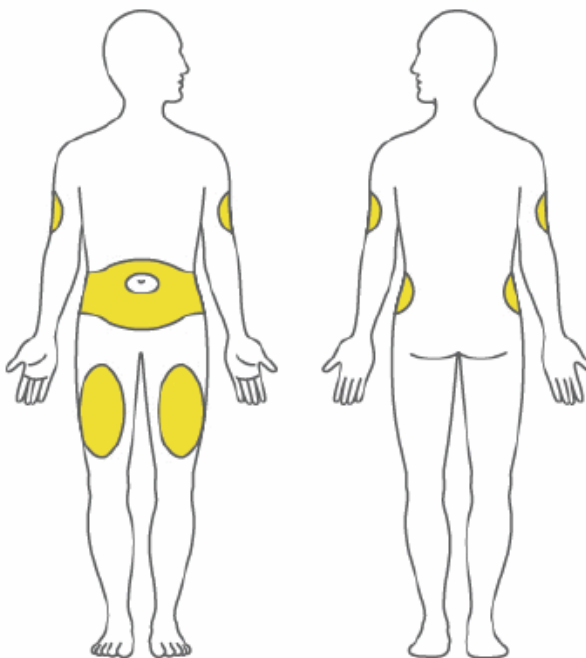

spredaj

zadaj

### Odmerjanje in način uporabe

**Začetni odmerek:** zdravljenje se začne z 10 mcg zdravila Lyxumia enkrat na dan 14 dni (**zeleni** peresnik).

**Vzdrževalni odmerek:** od 15. dne po začetku zdravljenja je stalni vzdrževalni odmerek 20 mcg zdravila Lyxumia enkrat na dan (**škrlatni** peresnik).



### Kako začeti?

**Aktivirajte peresnik na dan, ko boste zdravilo prvič injicirali!**

**Pred injiciranjem odmerka** morate iz novega peresnika najprej odstraniti odvečno tekočino. To je treba narediti le enkrat in ta postopek imenujemo "aktivacija".

Aktivacija je potrebna, da preverite pravilno delovanje peresnika in zagotovite, da je odmerek za vaše prvo injiciranje pravilen.

**Ne ponavljajte** postopka aktivacije, ker sicer iz peresnika Lyxumia ne boste dobili 14 odmerkov!

**1. korak: snemite pokrovček peresnika in peresnik preverite.**



Preverite tekočino. Biti mora bistra in brezbarvna.

Prepričajte se, da je aktivacijsko okence oranžno.

**2. korak: namestite iglo in odstranite pokrovčka igle.**



**3. korak: izvlecite gumb za injiciranje.**

Puščica bo zdaj kazala k igli



**4. korak: pritisnite gumb za injiciranje in ga držite, da boste odstranili odvečno tekočino.**

Morda boste čutili ali slišali "klik".

**Držite gumb za injiciranje pritisnjen in počasi preštejte do 5, da boste iztisnili zadnje kapljice.**



**5. korak: peresnik je zdaj aktiviran. Tega peresnika ne aktivirajte več.**

Spodnji sliki kažeta, kako se aktivacijsko okence na gumbu za injiciranje po aktivaciji spremeni.

Nov peresnik  
(oranžno okence)



Peresnik, pripravljen za injiciranje  
(belo okence)



### **VSAKODNEVNA UPORABA PERESNIKA**

(glej navodila za uporabo, ki so priložena v škatlici zdravila!).

**Vsak dan si injicirajte en sam odmerek.**

- 1. Snemite pokrovček peresnika in peresnik preverite.**
- 2. Namestite novo iglo in odstranite pokrovčka igle.**
- 3. Izvlecite gumb za injiciranje.**
- 4. Pritisnite in držite gumb za injiciranje, da boste injicirali odmerek.**
- 5. Iglo po vsakem injiciranju odstranite in zavržite.**

Povzeto po:[PDF] Lyxumia, INN-lixisenatide - Europa

Dosegljivo na:

[www.ema.europa.eu/docs/sl\\_SI/document\\_library/EPAR.../WC500140401.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/sl_SI/document_library/EPAR.../WC500140401.pdf)

Pripravila: Simona Sternad

ZL 75 I7 002 Povezava: OP 75 IV 003  
Izdaja 01 Z dne 19. 1. 2017

**UKC** | Univerzitetni  
**MARIBOR** | klinični center  
Maribor

Diabetološka ambulanta

**Lyxumia**  
lixisenatide

